


PILOT-19 LITE QUICK START GUIDE

IMPORTANT!

- Fully charge the battery before storage and recharge it once every 6 months while stored! Failure to do so will void the warranty.
- DO NOT expose the battery to temperatures above 40°C / 104°F or below -10°C / 14°F. Extreme temperature ranges can cause damage to the battery cells and result in fire Hazards!

PILOT-19 LITE CONTROL PANEL

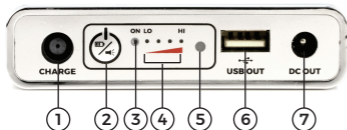

1. Charge Port
2. Multi Function Button
3. Blue "ON" Indicator Light
4. Green Charge Level Indicator Lights
5. LED Flashlight
6. USB Port (5V 2.5A Out)
7. DC Out Port

CHARGING THE PILOT-19 LITE

Charge times for the Pilot-19 Lite via the React Health Luna TravelPAP device AC adapter is approximately 4-5 hours.

Charge time via other compatible power adapters may vary. The Pilot-19 Lite can also be charged using the Medistrom Pilot Lite AC Adapter (P24ACCACA).

NOTE: The Medistrom Pilot Lite AC Adapter (P24ACCACA) should not be used in the backup configuration.

Please fully charge your Pilot-19 Lite before using for the first time.



CONNECTING PILOT-19 LITE TO PAP DEVICE

Plug the long L-shaped yellow tipped end of the DC Output cable for React Health Luna TravelPAP (P19BM1DOC) into the DC Out Port of your Pilot-19 Lite and plug the short L-shaped yellow tipped end of the DC Output cable for React Health Luna TravelPAP (P19BM1DOC) into the React Health Luna TravelPAP device.

To use in backup configuration, keep battery charging while connected to PAP device.



For technical support and questions about this product please email to support@medistrom.com or contact us by phone:


North America: 1-888-407-4791 | Australia: 1300-146-358 | Europe: +44-800-060-8576

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU PILOT-19 LITE

IMPORTANT!

- Chargez complètement la batterie avant de la stocker et rechargez-la au moins une fois tous les 6 mois pendant son stockage !
- N'exposez PAS la batterie à des températures supérieures à 40 °C / 104 °F ou inférieures à -10 °C / 14 °F. Les plages de température extrêmes peuvent endommager les cellules de la batterie et entraîner des risques d'incendie !

PANNEAU DE COMMANDE PILOT-19 LITE

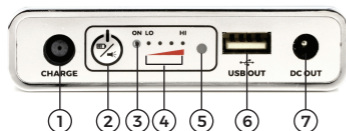

1. Port de charge
2. Bouton multifonction
3. Voyant bleu « ON »
4. Voyants verts de niveau de charge
5. Lampe de poche LED
6. Port USB (sortie 5V 2.5A)
7. Port de sortie CC

CHARGEMENT DU PILOT-19 LITE

Les temps de charge du Pilot-19 Lite via l'adaptateur CA de l'appareil React Health Luna TravelPAP sont d'environ 4 à 5 heures. Le temps de charge via d'autres adaptateurs d'alimentation compatibles peut varier. Le Pilot-19 Lite peut également être chargé à l'aide de l'adaptateur CA Medistrom Pilot Lite (P24ACCACA).

REMARQUE : L'adaptateur CA Medistrom Pilot Lite (P24ACCACA) ne doit pas être utilisé dans la configuration de sauvegarde.

Veillez charger complètement votre Pilot-19 lite avant de l'utiliser pour la première fois.



CONNEXION DU PILOT-19 LITE À L'APPAREIL PAP

Branchez la longue extrémité jaune en forme de L du câble de sortie CC pour React Health Luna TravelPAP (P19BM1DOC) dans le port de sortie CC de votre Pilot-19 Lite et branchez l'extrémité courte à pointe jaune en forme de L du câble de sortie CC pour React Health Luna TravelPAP (P19BM1DOC) dans l'appareil React Health Luna TravelPAP.

Pour une utilisation dans une configuration de secours, maintenez la batterie en charge lorsqu'elle est connectée à l'appareil PAP.




Pour l'assistance technique et les questions sur ce produit, veuillez support@medistrom.com envoyer un e-mail ou nous contacter par téléphone : Amérique du Nord :1-888-407-4791 | Australie: 1300-146-358 | Europe: +44-800-060-8576

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE PILOT-19 LITE

¡IMPORTANTE!

- **Cargue completamente su Pilot Lite antes del almacenamiento y al menos una vez CADA 6 MESES a partir de entonces. El no hacerlo se considerará negligencia y anulará la garantía.**
- **NO exponga la batería a temperaturas superiores a 40 °C / 104 °F o inferiores a -10 °C / 14 °F. Los rangos de temperatura extremos pueden dañar las celdas de la batería y provocar riesgos de incendio.**

PILOT-19 LITE PANEL DE CONTROL

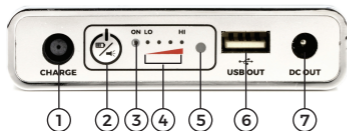

1. Puerto de carga
2. Botón multifunción
3. Luz indicadora azul "ENCENDIDO" (ON)
4. Luces verdes indicadoras de nivel de carga
5. Linterna LED
6. Puerto USB (Salida 5V, 2.5 A)
7. Puerto de salida Corriente Continua (DC Out)

CARGAR PILOT-19 LITE

Los tiempos de carga del Pilot-19 Lite a través del adaptador de CA del dispositivo React Health Luna TravelPAP son de aproximadamente 4-5 horas. El tiempo de carga a través de otros adaptadores de corriente compatibles puede variar. El Pilot-19 Lite también se puede cargar con el adaptador de CA Medistrom Pilot Lite (P24ACCACA).

NOTA: El adaptador de CA Medistrom Pilot Lite (P24ACCACA) no debe utilizarse en la configuración de copia de seguridad.

Cargue completamente su Pilot-19 lite antes de usarlo por primera vez.



CONEXIÓN DE PILOT-19 LITE AL DISPOSITIVO PAP

Conecte el extremo largo con punta amarilla en forma de L del cable de salida de CC para React Health Luna TravelPAP (P19BM1DOC) en el puerto de salida de CC de su Pilot-19 Lite y conecte el extremo corto con punta amarilla en forma de L del cable de salida de CC para React Health Luna TravelPAP (P19BM1DOC) en el dispositivo React Health Luna TravelPAP.

Para usar en configuración de respaldo, mantenga la batería cargando mientras está conectado al dispositivo React Health Luna TravelPAP PAP.



Para soporte técnico y preguntas sobre este producto, envíe un correo electrónico a support@medistrom.com o contáctenos por teléfono:

América del Norte: 1-888-407-4791 | Australia: 1300-146-358 | Europa: +44-800-060-8576